

Ihr Partner in Sachen

- Liegen
- Anfertigungen nach Wunsch
- Medizintechnisches Zubehör



DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



Modell 323-00

Neu:

Optimale Reinigungs- und Desinfizierbarkeit durch Dewert-Hygiene-Ausstattung:

- Scharnierabdeckung aus farbgleichem Kunstleder
- Auch Kopfteilunterseite mit farbidentlichem Kunstleder bezogen




Modell 2030-00XL/H (Abb. mit Sonderzubehör)

NEU!



...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar

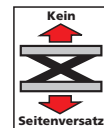

DEWERT
Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen Skai® Pandoria Plus (20 Farben) und Stamskin® Top (34 Farben)

Neu:

Optimale Reinigungs- und Desinfizierbarkeit durch Dewert-Hygiene-Ausstattung:

- Scharnierabdeckung aus farbgleichem Kunstleder
- Auch Kopfteilunterseite mit farbidentlichem Kunstleder bezogen



Abb. zeigen Mod. 2030-00XL/H mit Sonderzubehör:

Mod. 1180N (Rollen zentral feststellbar)


2x Mod. 1080 (Seitengitter seitlich absenkbar)

Liegen mit elektromotorischer Verstellbarkeit müssen zum Schutz vor unbefugter Betätigung (lt. BfArM, 2.08.2004) eine Sicherheitseinrichtung haben. Wählen Sie hierzu zwischen unseren 2 Varianten:

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 34)

- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 34)

...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar

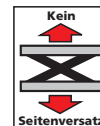

Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen Skai® Pandoria Plus (20 Farben) und Stamskin® Top (34 Farben)

Modell 2030-...XL und 2035...XL

Die Art der Höhenverstellbarkeit ist wählbar:

- Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche
- Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:
 - Kopfteil 750 mm lang, in eleganter Optik
 - Kopfteil stufenlos positiv (+70°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von der Liegehöhe)
 - Fußteil fest, Länge Fußteil 1.200 mm
 - In der Grundausrüstung ist die Liege feststehend. Verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar
- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)
- Polsterteilstärke standardmäßig: 6 cm
Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinen Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht. Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum
- Das Liegenpolster ist in der Grundausrüstung fest gepolstert, als Sonderzubehör sind verschiedene Möglichkeiten der Softpolsterung vorhanden
- Liegengestell wahlweise lieferbar in: RAL 9010 (-00), RAL 9006 oder RAL 9007 (-04)
- Mit Dewert-Hygiene-Ausstattung

Abm.: Länge 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe
2030-00XL/H	700 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	Untergestell weiß
2030-04XL/H	700 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	Untergestell silber
2035-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	Untergestell weiß
2035-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	Untergestell silber
2030-00XL	700 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell weiß
2030-04XL	700 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell silber
2035-00XL	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell weiß
2035-04XL	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell silber

Mögliche Sonderausstattungen (weiteres Zubehör auf Anfrage)

- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1770)
- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort, für Liegenbreite 800 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1780)
- Papierrollenhalter (Mod. 1270K, 1270F, 1280K, 1280F)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, Rollen komplett zentral bedienbar
1 Rolle mit Richtungsfeststeller (Mod. 1180N)
- Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar (2x Mod. 1080),
Fixierung der Seitengitter in der aufrechten wie in der abgesenkten Position durch einen massiven Arretierbolzen. Seitengitter komplett aus Stahlrohr gefertigt, keine brechenden Kunststoffelemente

... weiteres Zubehör auf Anfrage



Auftritte mit Handlauf

Modell 323-00, Gestell weiß pulverbeschichtet
Modell 323-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Mit einseitigem Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit für Ihren Patienten.

Ohne Aufpreis wählbar: Handlauf rechts oder links
Untergestell aus 4-kant-Rohr, pulverbeschichtet.
Lieferbar wahlweise in:

- RAL 9010 (-00), - RAL 9006 oder - RAL 9007 (-04)

Auftrittplatten sind PUR-Schaumauflagen mit Holzkern,
Farbe schwarz.

Gestell zusätzlich mit Rundtellern unter den Füßen sowie
einem Ausleger zur Vermeidung der Kippgefahr.

Abmessungen:

Höhe 1. Stufe: 230 mm, Höhe 2. Stufe: 460 mm

Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm

Maße gesamt:

Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm

Breite incl. Ausleger: 800 mm

Tiefe: 600 mm

Modell 324-00, Gestell weiß pulverbeschichtet
Modell 324-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Mit beidseitigem Handlauf als Aufstiegshilfe und zur Sicherheit für Ihren Patienten.

Beschreibung wie Modell 323, jedoch:

Gestell dann mit 2 Auslegern zur Vermeidung der Kippgefahr

Abmessungen:

Höhe 1. Stufe: 230 mm, Höhe 2. Stufe: 460 mm

Größe Auftrittplatten: je 550 x 300 mm

Maße gesamt:

Höhe Oberkante Handlauf: 1.350 mm

Breite incl. Ausleger: 1.050 mm

Tiefe: 600 mm