

Behandlungs- und Therapieliegen

Serie **DX1**

Bewährtes...
einfach weitergedacht...

DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



.....die DX1 1000er-Reihe



.....die DX1 1050er-Reihe



.....die DX1 1090er-Reihe



Abb. evtl. mit Sonderzubehör

Basierend auf der seit Jahrzehnten bewährten Dewert-Technologie in Kombination vieler Einzelfaktoren wie Achsen-Lagerung und - Stärke, Rollen-Führungen, Materialabmessungen und Materialstärke entstand unsere Liegenserie **DX1**.

Die Liegenserie **DX1** ist durch spezielle Rollenführungen spielfrei eingestellt und nimmt seitliche und vertikale Kräfte auf, ohne nachzufedern.

Für eine sichere und zuverlässige Höhenverstellung der Liegen sorgen wahlweise ein robuster Elektromotor oder eine robuste Hydraulikpumpe. Mit unserem bewährten Liegenpolster (Basis: Schichtholz!) sowie einem Polsterbezug, wählbar aus 2 exzellenten Kunstlederkollektionen hat die **DX1** die besten Voraussetzungen für den Einsatz in der täglichen Praxis.

Gute Gründe für eine **DX1**

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg
(entsprechend IEC 60601 mit
4-facher statischer Last geprüft)

- Kopfteil belastbar bis 90 Kg

- Integrierter Nasenschlitz
mit Abdeckung

- Stabile, angeschweißte Stahlscharnierbefestigung
des Kopfteils am Polsterrahmen

- Bedienung durch Fußschalter oder optional
durch Handschalter, ohne Aufpreis

- hohe Stabilität durch massive 20 mm-
Achsen mit mehrfacher IguS-Lagerung

- sehr stabiles Single-Frame- Scherensystem
mit hoher Verwindungsfestigkeit durch Verwendung
von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch
im Unter- und Obergestell

- Gestell feststehend, mit Nivellierfüßen
zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel
(Sicherheitseinrichtung zum Schutz vor
unbefugter Betätigung)

- Netzanschlußkabel 4m lang - kein
Trafoteil notwendig



Neu: Optimale Reinigungs- und Desinfizierbarkeit
durch Dewert-Hygiene-Ausstattung:

- Scharnierabdeckung aus farbgleichem Kunstleder
- Auch Kopfteilunterseite mit farbidentischem Kunstleder bezogen

Polsterbezug: Wählen Sie - **ohne Aufpreis** - zwischen 2 exzellenten Kunstlederkollektionen

- Skai® Pandora Plus, mit samtig-glatte Oberfläche (20 Farben)
- Stamskin® Top mit genarbter Oberfläche (34 Farben)

- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte (keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)

- Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht (RG42 + RG75).
Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum!

- Polsterteilstärke: 60 mm

- stabiler AC-Motor mit 8000N Hubkraft (Fabr. Hanning)
- konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei Vollast (38 sec).
- Erstprüfung der Liege (BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1) nach Lieferung – bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors – nach 4 Jahren.
Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor



- verschleißfestes Führungssystem am Unter- und Obergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen

- Basisausstattung:
Mit Nasenschlitz
Minderpreis bei Entfall

... auch mit hydraulischer Höhenverstellung:

- Starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung
dadurch leichte Betätigung auch bei höheren Gewichten

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

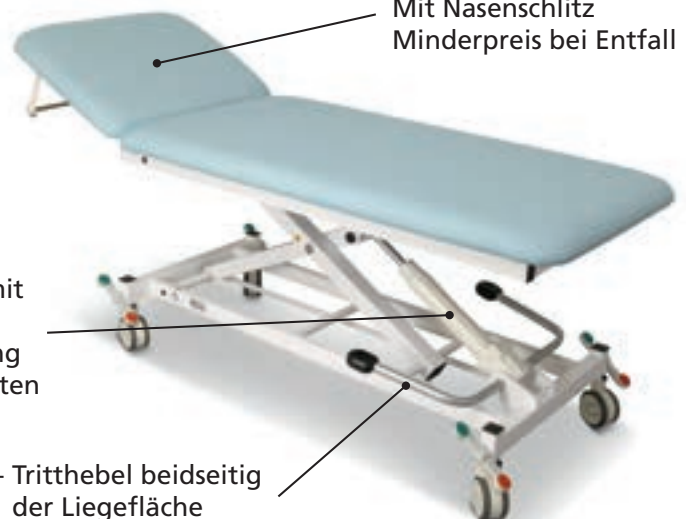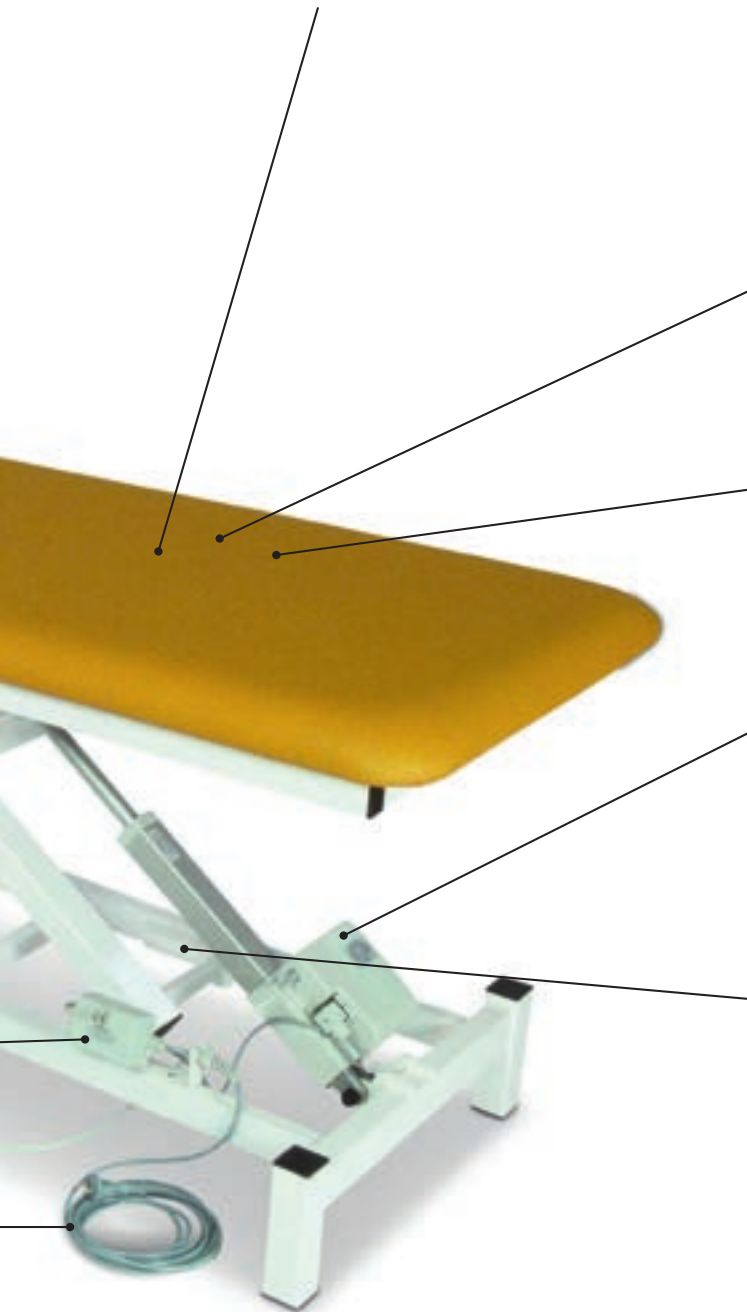

DX1-H **Modell 1000-H**

...mit hydraulischer Höhenverstellung

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg



Abb. zeigt Mod. 1000-00/H mit Sonderzubehör:

Mod. 046 (Rollen zentral feststellbar)

Mod. 010K (Papierrollenhalter montiert unterhalb des Kopfteils)

Mod. 1615-EF (Entfall Nasenschlitz)



Abb. zeigt Mod. 1000-00/H mit Sonderzubehör:

Mod. 046 (Rollen zentral feststellbar)

Mod. 1008 (2 Seitengitter seitlich absenkbar)

Mod. 1615-EF (Entfall Nasenschlitz)

Serie **DX1-H**

Modell 1000-00-H weiß pulverbeschichtet

Modell 1000-04-H silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung der Liege:

Höhenverstellung: Manuell durch eine Hydraulikpumpe
Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche

Liegefläche: 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest

Standardmäßig ist die Liege feststehend mit Nivellierfüßen ausgestattet

Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen Skai® Pandoria Plus (20 Farben)
und Stamskin® Top (34 Farben)

Abmessungen:

Länge gesamt:	1.950 mm,
Breite:	700 mm,
Höhe:	470 bis 920 mm verstellbar
Kopfteillänge:	550 mm
Fußteillänge:	1.400 mm
Belastbarkeit:	225 Kg
Eigengewicht der Liege:	80 Kg

Mögliche Sonderausstattungen:

- Polsterbreite 800 mm (Mod. 006)
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Mod. 040)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar (Mod. 046),
1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 490 bis 940 mm)
- Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe (Mod. 045)
- Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (Mod. 056)
(dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)
- Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite (Mod. 010K, 015K)
- Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend) (Mod. 010F, 015F)
- Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet (Mod. 1008)
- Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage möglich

DX1 **Modell 1000**

...mit elektromotorische Höhenverstellung

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg



Abb. zeigt Mod. 1000-00 in der Grundausstattung mit Handschalter



**Abb. zeigt Mod. 1000-00 mit Handschalter
und mit Sonderzubehör:
Mod. 046 (Rollen zentral feststellbar)
Mod. 1615-EF (Entfall Nasenschlitz)**

Serie **DX1**

Modell 1000-00 weiß pulverbeschichtet
Modell 1000-04 silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung der Liege:

Höhenverstellung: Durch einen robusten Elektromotor, die Motorbedienung ist wahlweise durch 1 Fußschalter oder 1 Handschalter möglich

Sicherheitseinrichtung: Mit Sperrbox zum Schutz vor unbefugter Betätigung

Liegefläche: 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest

Standardmäßig ist die Liege feststehend mit Nivellierfüßen ausgestattet

Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen Skai® Pandoria Plus (20 Farben) und Stamskin® Top (34 Farben)

Abmessungen:

Länge gesamt:	1.950 mm,
Breite:	700 mm,
Höhe:	480 bis 920 mm verstellbar
Kopfteillänge:	550 mm
Fußteillänge:	1.400 mm
Belastbarkeit:	225 Kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)
Eigengewicht der Liege:	80 Kg
Anschlußwerte Elektromotor:	230V AC – 50/60Hz, 470W, 2,0A Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast

Mögliche Sonderausstattungen:

- Polsterbreite 800 mm (Mod. 006)
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Mod. 040)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar (Mod. 046), 1 Rolle mit Richtungsfeststellung (Höhenverstellbereich von 500 bis 940 mm)
- Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe (Mod. 045)
- Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (Mod. 056) (dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)
- Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite (Mod. 010K, 015K)
- Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend) (Mod. 010F, 015F)
- Zusätzlicher Handschalter (Mod. 090)
- Zusätzlicher Fußschalter (Mod. 091)
- 1 Stück Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Mod. 092)
- Bedienung der Elektromotors durch längsseitige Fußschaltstangen (Mod. 094)
- Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet (Mod. 1008)
- Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage möglich

DX1

...jetzt auch mit dreiteiliger Liegefläche

- Max. sichere Arbeitslast 225 kg
(entsprechend IEC 60601 mit
4-facher statischer Last geprüft)

- Polsterbasis: mehrfach verleimte, hochfeste Schichtholzplatte
(keine brechende Spanplatte bei Randbelastung)

- Integrierter Nasenschlitz
mit Abdeckung (Basisausstattung)

Neu: Optimale Reinigungs- und Desinfizierbarkeit durch
Dewert-Hygiene-Ausstattung:

- Scharnierabdeckung aus farbidentischem Kunstleder
- Auch Kopfteilunterseite mit farbidentischem Kunstleder bezogen

- Stabile, angeschweißte Stahlscharnierbefestigungen von Kopf-
und Fußteil am Gestellrahmen

- verschleißfestes Führungssystem am Ober- und Untergestell
durch Einsatz von Wälzlagerrollen

- Netzanschlußkabel 4 m lang

- inklusive Sperrbox mit Magnetschlüssel
(Sicherheitsausstattung zum Schutz vor
unbefugter Betätigung)

- Bedienung durch Fußschalter oder
optional durch Handschalter

- hohe Stabilität durch massive 20 mm-
Achsen mit mehrfacher IGUS-Lagerung

Polsterbezug: Wählen Sie - **ohne Aufpreis** - aus 2 hochwertigen Kunstlederkollektionen

- Skai @Pandoria Plus (Oberfläche samtig-glatt) mit 20 Farben
- Stamskin @Top mit genarbter Oberfläche (34 Farben)

- Polsterung mit 2-lagigem, sortenreinen Polyurethan-Schaumstoff mit hohem Raumgewicht. Kein aus verklebten Restflocken bestehender Verbundschaum



- verstellbares Fußteil mit Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit

- Fußteil auch als Rückenstütze einsetzbar für reversible Lagerung Ihres Patienten

- druckstabile Gasdruckfeder für schwingungsfreies Arbeiten am Fußbereich

- freie, nicht störende Zugänglichkeit des Bediengriffes am Fußende

- sehr stabiles Single-Frame-Scherensystem mit hoher Verwindungsfestigkeit durch den Einsatz von großvolumigen und dickwandigen Stahlrohren auch im Ober- und Untergestell

- Bei Option: Fahrbar auf Rollen zentral feststellbar, Tritthebel zur Betätigung des zentralen Bremssystems bedienerfreundlich an allen 4 Seiten des Untergestells

- Abb. mit Zubehör:
Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm,
Rollen komplett zentral bedienbar
1 Rolle mit Richtungsfeststeller (Mod. 046)

(Grundausrüstung: Liege feststehend,
mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von
Bodenunebenheiten)

... auch mit hydraulischer Höhenverstellung



Behandlungs- und Therapieliege

Serie **DX1** Modell 1050...



Abb. zeigt Mod. 1050-04, elektromotorisch höhenverstellbar
(Untergestell in Farbe RAL 9007)
mit Sonderzubehör: Mod. 046 (Rollen zentral feststellbar)



Abb. zeigt Mod. 1050-04/H, hydraulisch manuell höhenverstellbar
(Untergestell in Farbe RAL 9006)
mit Sonderzubehör: Mod. 046 (Rollen zentral feststellbar)

Behandlungs- und Therapieliege



DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel

Serie **DX1** Modell 1050...

wahlweise:

- Höhenverstellung elektromotorisch durch Fußschalter (Option Handschalter)
- Höhenverstellung hydraulisch manuell durch Fußpedal (serienmäßig beidseitig der Liegefläche)

Liegefläche: 3-teilig,
Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) verstellbar durch Gasdruckfeder
Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
Mittelteil fest
Fußteil stufenlos positiv (+50°) verstellbar durch Gasdruckfeder

Serienmäßig feststehend, Ausstattung mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
Polsterbezug: Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen Skai® Pandoria Plus (20 Farben)
und Stamskin® Top (34 Farben)

Technische Daten		
Modell	Höhenverstellung	Gestellfarbe
1050-00/H	Hydraulisch: 490 - 940 mm	weiß
1050-04/H	Hydraulisch: 490 - 940 mm	silber
1050-00	Motorisch: 500 - 940 mm	weiß
1050-04	Motorisch: 500 - 940 mm	silber
Bei motorischer Höhenverstellung: Sperrbox serienmäßig enthalten Anschlußwerte Elektromotor: 230V AC – 50/60Hz, 470W, 2,0A Schutzklasse II, IP 44 mit Thermosicherung bei Überlast		
Abmessungen: Liegefläche Länge: 1.950 mm; Breite: 700 mm Länge Kopfteil: 550 mm Länge Mittelteil: 480 mm Länge Fußteil: 920 mm Eigengewicht: 90 kg Belastbarkeit: 225 kg (max. Patientengewicht)		

Mögliche Sonderausstattungen:

- Polsterbreite 800 mm (Mod. 007)
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (Mod. 040)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen 100 mm diam., Rollen komplett zentral bedienbar (Mod. 046),
1 Rolle mit Richtungsfeststellung (dann Höhenverstellbereich + 2 cm)
- Rad-Hebe-System, dadurch fahr- oder feststellbar in jeder Liegehöhe (Mod. 045)
- Kopfteil 3-teilig: mit seitlich absenk-/abnehmbaren Armstützen (Mod. 056)
(dann Kopfteilverstellung von +45° bis -25°)
- Papierrollenhalter, montiert an Kopfteilunterseite (Mod. 010K, 015K)
- Papierrollenhalter, montiert an Fußteil (schräg nach vorn vorstehend) (Mod. 010F, 015F)
- Zusätzlicher Handschalter (Mod. 090)
- Zusätzlicher Fußschalter (Mod. 091)
- 1 Stück Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Mod. 092)
- Seitengitter, Paar (2 Stück), versenkbar, Länge: 820 mm, silber beschichtet (Mod. 1008)
- Minderpreis bei Entfall des Nasenschlitzes

DX1

....jetzt auch als Transport- und Aufwachliege

Max. sichere Arbeitslast 225 kg
(entsprechend IEC 60601 mit
4-facher statischer Last geprüft)

Neu: Optimale Reinigungs- und Desinfizierbarkeit durch
Dewert-Hygiene-Ausstattung:

- Scharnierabdeckung aus farbgleichem Kunstleder
- Auch Kopfteilunterseite mit farbidentischem Kunstleder bezogen

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder
von 0° bis +65° verstellbar

- Schiebegriffe in geteilter Ausführung am Kopfteil
ermöglichen einen guten Zugang zum Verstellhebel

- 2 sehr stabile Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar
Fixierung der Seitengitter in der aufrechten wie in der abgesenkten
Position durch einen massiven Arretierbolzen
Seitengitter komplett aus Stahlrohr gefertigt,
keine brechenden Kunststoffelemente

- hohe Stabilität durch massive 20 mm-
Achsen mit mehrfacher IGUS-Lagerung

- Standardmäßig fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm,
zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller

- sehr stabiles Single-Frame-Scherensystem mit hoher
Verwindungsfestigkeit durch den Einsatz von großvolumigen
und dickwandigen Stahlrohren auch im Ober- und Untergestell

Polsterbezug: Wählen Sie - **ohne Aufpreis** - aus 2 hochwertigen Kunstlederkollektionen
- Skai @Pandoria Plus (Oberfläche samtig-glatt) mit 20 Farben
- Stamskin @Top mit genarbter Oberfläche (34 Farben)

Basisausstattung:

Liegenpolster in halbsoft-Ausführung für erhöhten Liegekomfort:

- obere Lage aus hochwertigem Kaltschaum,
 - untere Lage aus sortenreinem Polyurethan-Schaumstoff in RG75.
 - Polsterbasis = Schichtholzplatte
- Polsterteilstärke 7 cm



- an den Rahmenaußenpunkten platzierte Schiebegriffe (sowohl an Kopf- und Fußteil) dadurch sehr gutes Handling beim Schieben der Liege

- 4 großdimensionierte Wandabweisräder Ø 200 mm bieten einen Wandschutz längs- wie auch querseitig. Die Wandabweiser stellen die Außenpunkte der Liege dar

- Tritthebel zur Betätigung der Hydraulik sind beidseitig der Liegefläche angeordnet

- eine starke Hydraulikpumpe mit großer Übersetzung bewirkt auch bei höheren Gewichten eine leichte Betätigung

- verschleißfestes Führungssystem am Ober- und Untergestell durch Einsatz von Wälzlagerrollen

- Tritthebel zur Betätigung des zentralen Bremssystems bedienerfreundlich an allen 4 Seiten des Untergestells

- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +50° verstellbar. Fußteil mit Stahlrohrrahmen für hohe Verwindungssteifigkeit



... auch mit 3-teiliger Liegefläche

Transport- und Aufwachliege

Serie **DX1-H**



Abb. zeigen Modell 1090-00/H in der Grundausrüstung

Transport- und Aufwachliege

Modell 1090-00-H weiß pulverbeschichtet
Modell 1090-04-H silber pulverbeschichtet

Höhenverstellung: Hydraulisch manuell über Fußtritthebel

Grundausrüstung:

- * Liegefläche 2-teilig:
 - Kopfteil stufenlos positiv durch Gasdruckfeder bis +65° verstellbar
 - Fußteil fest
- * Liegenpolster in halbsoft-Ausführung, Polsterteilstärke 7 cm
- * Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar
1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- * Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil (gelb pulverbeschichtet)
- * 4 Wandabweisräder Ø 200 mm
- * 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar (silber pulverbeschichtet). Länge Seitengitter: 820 mm
- * Liegengestell wahlweise lieferbar in:
RAL 9010 (-00), RAL 9006 oder RAL 9007 (-04)
- * Polsterbezug: Wählbar zwischen Skai @Pandoria Plus und Stamskin @Top, ohne Aufpreis
- * Mit Dewert-Hygiene-Ausrüstung

Abmessungen:

Länge: Liegefläche: 1.950 mm, gesamt: 2.060 mm

Breite: Liegefläche: 700 mm, gesamt: 780 mm

Höhe: von 500 mm – 950 mm verstellbar

Länge Polstersegmente:

Kopfteil: 550 mm, Fußteil: 1.400 mm

Eigengewicht: 100 kg

Belastbarkeit: 225 kg (max. Patientengewicht)

Mögliche Sonderausstattungen (weiteres Zubehör auf Anfrage)

- Polsterbreite 800 mm (Mod. 016)
- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1770)
- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort, für Liegenbreite 800 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1780)
- Papierrollenhalter montiert unterhalb des Kopfteils für Liegenbreite 700 mm (Mod. 011K)
- Papierrollenhalter montiert unterhalb des Kopfteils für Liegenbreite 800 mm (Mod. 013K)
- Ablagekorb (Mod. 1850)
- Normschiene 350 mm lang (Mod. 1410)
- Befestigungskloben für Normschiene (Mod. 1430)
- Infusionsstange für Normschiene (Mod. 1450)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 125 mm, zentral feststellbar
1 Rolle mit Richtungsfeststeller (Mod. 1185)

Transport- und Aufwachliege

Serie **DX1-H**

DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



Abb. zeigen Modell 1095-00/H in der Grundausstattung

Transport- und Aufwachliege

Modell 1095-00-H weiß pulverbeschichtet
Modell 1095-04-H silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- * Hydraulische Höhenverstellung, Tritthebel beidseitig
- * Liegefläche 3-teilig:
 - Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +65° verstellbar
 - Mittelteil fest
 - Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +50° verstellbar
- * Liegenpolster in halbsoft-Ausführung, Polsterstärke 7 cm
- * Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- * Schiebegriffe kopf- und fußseitig (gelb pulverbeschichtet)
- * 4 Wandabweisräder Ø 200 mm
- * 2 Seitengitter (Länge 820 mm) seitlich unter Polsterniveau absenkbar (silber pulverbeschichtet)
- * Liegengestell wahlweise lieferbar in:
 - RAL 9010 (-00), RAL 9006 oder RAL 9007 (-04)
- * Polsterbezug: Wählbar zwischen Skai ®Pandoria Plus und Stamskin ®Top, ohne Aufpreis
- * Mit Dewert-Hygiene-Ausstattung

Abmessungen:

Länge: Liegefläche: 1.950 mm, gesamt: 2.060 mm

Breite: Liegefläche: 700 mm, gesamt: 780 mm

Höhe: von 520 mm – 970 mm verstellbar

Länge Polstersegmente:

Kopfteil: 550 mm, Mittelteil: 480 mm, Fußteil: 920 mm

Eigengewicht: 110 kg

Belastbarkeit: 225 kg (max. Patientengewicht)

Mögliche Sonderausstattungen (weiteres Zubehör auf Anfrage)

- Polsterbreite 800 mm (Mod. 016)
- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1770)
- Softelastisches Liegenpolster für höchsten Liegekomfort, für Liegenbreite 800 mm, dann Polsterteil 85 mm stark (Mod. 1780)
- Papierrollenhalter montiert unterhalb des Kopfteils für Liegenbreite 700 mm (Mod. 011K)
- Papierrollenhalter montiert unterhalb des Kopfteils für Liegenbreite 800 mm (Mod. 013K)
- Normschiene 350 mm lang (Mod. 1410)
- Befestigungskloben für Normschiene (Mod. 1430)
- Infusionsstange für Normschiene (Mod. 1450)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 125 mm, zentral feststellbar
1 Rolle mit Richtungsfeststeller (Mod. 1185)

Behandlungs- und Therapieliegen

Serie **DX1**

Bewährtes...
einfach weitergedacht...

DEWERT

Präzisions-
Stahlrohrmöbel



.....die DX1 1000er-Reihe



.....die DX1 1050er-Reihe



.....die DX1 1090er-Reihe



Abb. evtl. mit Sonderzubehör

K. H. Dewert GmbH · Vollmestraße 7 · D-33649 Bielefeld
Postfach 14 40 28 · D-33634 Bielefeld · Germany
Telefon + 49 (0) 521/40027-0 · Fax + 49 (0) 521/40027-27
Internet: www.khdewert.de · E-Mail: info@khdewert.de