

Serie 2000XL

2-teilige Universal-Liege mit hydraulischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2006-00XL/H und 2007-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2006-03XL/H und 2007-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2006-04XL/H und 2007-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2806-..XL/H entspricht Modell 2006-..XL/H, jedoch mit Nasenschlitz

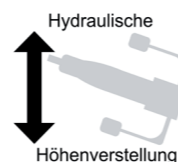

Alle Abb.:
Modell 2007-00XL/H
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter 1280K
Polsterfarbe: 64-721 atoll

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90 bis +30° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm





Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 540 mm bis 960 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2006-..XL/H: 700 mm | Modell 2007-..XL/H: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.550 mm - max. 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

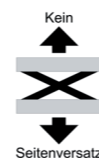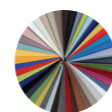

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm