

Serie 2000XL

3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2010-00XLE und 2011-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2010-03XLE und 2011-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2010-04XLE und 2011-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2807-..XLE entspricht Modell 2010-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz

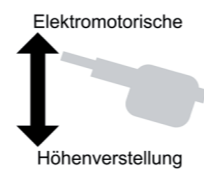

Modell 2010-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen (1185); Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Fußteil senkrecht abklappbar, dadurch variable Liegenlänge
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv von 0° bis +60° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 1.050 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Fußteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2010-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (1185), Papierrollenhalter (1270K/F)

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 530 mm bis 970 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2010-..XLE: 700 mm | Modell 2011-..XLE: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.550 mm - max. 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K / 1280F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270K/F / 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080-60
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 820 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm