

Serie 2000XL

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2052-00XLE und 2053-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2052-03XLE und 2053-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2052-04XLE und 2053-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 2910-..XLE

entspricht Modell 2052-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz



Obere 3 Abb.:
Modell 2052-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen (1185);
Polsterfarbe: 64-716 black



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Gesamte Liegefläche elektromotorisch neigbar bis 22° (Trendelenburg) in 18 Sek.
- Bedienung der elektromotorischen Neigungsverstellung durch Handschalter
- Bedienung des elektromotorischen Höhenverstellung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Elektromotorische Höhenverstellung durch Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -20° bis +45° verstellbar
 - Kopfteillänge: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 - Fußteil fest
 - Fußteillänge: 1.500 mm
 - Polsterteilstärke: 60 mm



Modell 2052-00XLE mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N),
2 Stück Seitensicherungen seitlich versenkbar (1080)


Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 540 mm bis 980 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Elektromotorische Neigungsverstellung bis 22° (Trendelenburg) in 18 Sek.
- Breite der Liegefläche: Modell 2052-..XLE: 700 mm | Modell 2053-..XLE: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

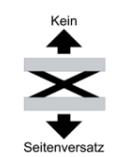

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm