

Serie 2000XL

Kurzliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2100-00XLE, 2105-00XLE, 2110-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2100-03XLE, 2105-03XLE, 2110-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2100-04XLE, 2105-04XLE, 2110-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Alle Abb.:
Modell 2100-00XLE
mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf
einzeln feststellbaren Rollen
(1120N-10), Entfall Fußschalter
(1910E-EF), Handschalter (1920E);
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.400 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Polsterteilstärke: 60 mm


Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2100-..XLE: 650 mm | Modell 2105-..XLE: 800 mm | Modell 2110-..XLE: 1.000 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.400 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

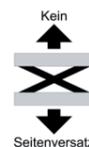

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Liege in unterer Position



Liege in oberer Position