

# Serie 4000E

## 2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung


... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 4000-00E und 4001-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 4000-03E und 4001-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4000-04E und 4001-04E grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

► Modell 4805-..XLE entspricht Modell 4000-..XLE, jedoch mit Nasenschlitz

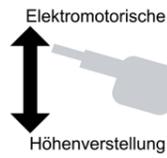

Alle Abb.:  
Modell 4000-00XLE  
mit Ausstattungsoptionen:  
Rad-Hebe-System (1045N),  
Entfall Fußschalter (1910E-EF),  
Handschalter (1920E);  
Polsterfarbe: 64-173 smaragd



Liege in höchster Position



Liege in niedrigster Position

### Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Großer Höhenverstellbereich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 500 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm in 18 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 4000E: 700 mm | Modell 4001E: 800 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185  
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E  
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E  
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E  
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1960E  
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Seitensicherungen



Art.-Nr. 1080  
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175 / 1176  
4 Wandabweisrader Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm