

Serie 2000XL


4-teilige Combi-Untersuchungsliege mit hydraulischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

Modell 2640-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2640-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2640-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

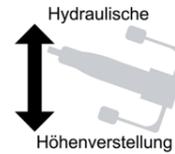

Obere 2 Abb.:
Modell 2640-01XL/H
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1265K),
Normschiene (1410),
Beinhalter (1510);
Polsterfarbe: 64-174 sky

Alle Abb.:
Modell 2640-01XL/H in
Sonderausführung:
Oberrahmen verchromt

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Rektoteil in der Höhe verstellbar, 100 mm breit
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Sitzteillänge: 400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Modell 2640-01XL/H mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1265K), Normschiene (1410)

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder, Verstellbereich: 0° - +60°

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Beinhalter



Art.-Nr. 1510
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520
Beinhalter nach Göpel

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Technische Daten:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.980 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet


kg



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

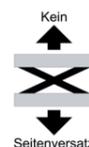

Druck- & Anzeigentechnisch kann es zu Farbabweichungen kommen. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.

Stand 04.2023_03
Änderungen der technischen Daten und Irrtümer vorbehalten.

