

Serie 2000XL

3-teilige Combi-Untersuchungsliege mit elektromotorischer Höhen- und Neigungsverstellung ... für Untersuchung, Rektoskopie, Gynäkologie ...

- Modell 2648-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2648-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2648-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2648-00XLE mit Ausstattungsoption: Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (1182), fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (1180N), Papierrollenhalter 1265K; obere Abb. zusätzlich: Beinhalter nach Göpel (1520); Polsterfarbe: 64-715 anthracite

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Fußschalter
- Elektromotorische Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche bis -15°, Bedienung durch einen Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor für die Höhenverstellung, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Mittelteil bis 50° positiv durch Zahnstangensystem verstellbar
- Mittelteillänge: 930 mm
- Sitzteil, mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Sitzteillänge: 450 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm



Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 650 mm bis 1.090 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet




kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

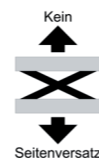

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder, Verstellbereich: 0° - +60°

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Beinhalter



Art.-Nr. 1510
Beinhalter mit Kunststoffschale



Art.-Nr. 1520
Beinhalter nach Göpel

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

