

Serie 2000XL - mit durchgehendem Rahmen

2-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung, Therapie ...

Modell 2600-00XLE und 2605-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2600-03XLE und 2605-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2600-04XLE und 2605-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Beide Abb.:
Modell 2605-04XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit (1182), fahrbar auf
zentral feststellbaren Rollen
(1180N), Papierrollenhalter
(1265K);
Polsterfarbe: 64-712 slate grey


Grundausstattung:

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

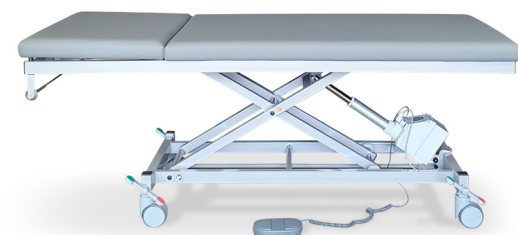

Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2600-..XLE: 650 mm | Modell 2605-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

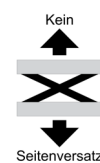

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung



Art.-Nr. 1960E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1265K / 1280K
Papierrollenhalter, Befesti-
gung unter dem Kopfteil (nicht
vorstehend), für Liegenbreite
650 mm / 800 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1655
Komfortable Kopfteil-
verstellung stufenlos
durch Gasdruckfeder von
0° bis +55°

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert
in das Kopfteil

Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm;
bei Gitter 1080: Art.-Nr. 1171,
Ø 200 mm

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich
versenkbar, verchromt, komplett aus
Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm
lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für
Normschiene, Aufnahme
passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1440
1 seitliche Armstütze,
schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich
dreh- und kippbar, für
Normschiene



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene,
ohne Befestigungskloben

