

Echokardiographie-Liegen

2-teilige Echokardiographie-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung ... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2550-00XLE und 2551-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2550-03XLE und 2551-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2550-04XLE und 2551-04XLE grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Hergestellt in Deutschland

Obere 2 Abb.:
Modell 2550-00XLE
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf zentral
feststellbaren Rollen (1180N),
Papierrollenhalter (1270K);
Polsterfarbe 64-717 deep sea



Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierfüßen zum Höhenausgleich
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen (in Patientenrückenlage links)
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos bis +50° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen:
Ausschnittseite: Patientenrückenlage links, Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.150 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Modell 2550-00XLE mit
Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf
einzel feststellbaren Rollen (1120N-10),
Ablagekorb (1850), Kopfteil
elektromotorisch verstellbar (1665-10)




Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: Modell 2550-..XLE: 700 mm | Modell 2551-..XLE: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

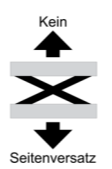

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1120N-10
Fahrbar auf 4 einzeln
feststellbaren Comfort-
Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 1180N
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen zentral
feststellbar, Ø 125 mm,
Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 1045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege



Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1170
1 Wandabweisrad Ø 150 mm



Art.-Nr. 1950E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 1665-10
Elektromotorische
Kopfteilverstellung bis +60°

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270K / 1280K
Papierrollenhalter,
Befestigung unter dem Kopfteil (nicht
vorstehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm



Art.-Nr. 1270F / 1280F
Papierrollenhalter,
Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1770 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort
aus Kaltschaum, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. 1772 / 1782
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm /
800 mm, Polsterstärke 70 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-50
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar,
verchromt, Stahlrohr ohne brechende
Kunststoffteile, Länge 1.060 mm,
Länge an Ausschnittseite 820 mm



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar,
verchromt, komplett aus Stahlrohr,
Länge 700 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für
Normschiene mit Befestigungskloben,
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm