

Echokardiographie-Liegen


3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

Modell 2695-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2695-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2695-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

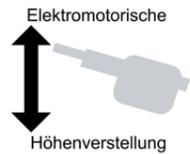

Alle Abb.:
Modell 2695-00XLE
mit Ausstattungsoption:
Papierrollenhalter (1270F/K),
Höhenverstellung mit Fuß-
schalter anstelle von Hand-
schalter;
Polsterfarbe
64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- 2 Echoausschnitte im Mittelteil mit Füllpolstern zum Verschließen
- Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar, Bedienung durch einen separaten Handschalter
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Handschalter, optional Drei-Stufen-Fußschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 400 mm, mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar
- Mittelteil mit Echoausschnitten und Füllpolstern zum Verschließen: Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Fußteil 970 mm
- Polsterteilstärke: 80 mm

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182
Entfall der serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1187
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem
Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell
tiefergelegt,
dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm


Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 1910-3E
1 Drei-Stufen-Fußschalter: Bei stärkerem
Druck auf die Abwärtstaste stoppt der Motor
und verfährt um einige cm in die
Gegenrichtung

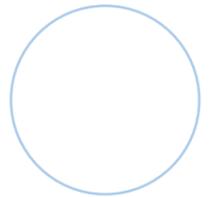

Art.-Nr. 1940-3E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit
Halterungen, für Liegenbreite
700 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 1270F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene
mit Befestigungskloben, komplett aus
Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 1772
Polster mittelweich durch Kaltschaum-
auflage, für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 90 mm



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!


Integriertes Sicherheitskonzept

entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung



Sicherheit muss gerade bei elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen an oberster Stelle stehen.

Entsprechend der aktuellen BfArM-Empfehlung sind unsere elektromotorisch höhenverstellbaren Liegen konstruktiv mit Sicherheitselementen ausgestattet, die dem Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung bzw. dem Schutz des Bedieners während der Höhenverstellung dienen:

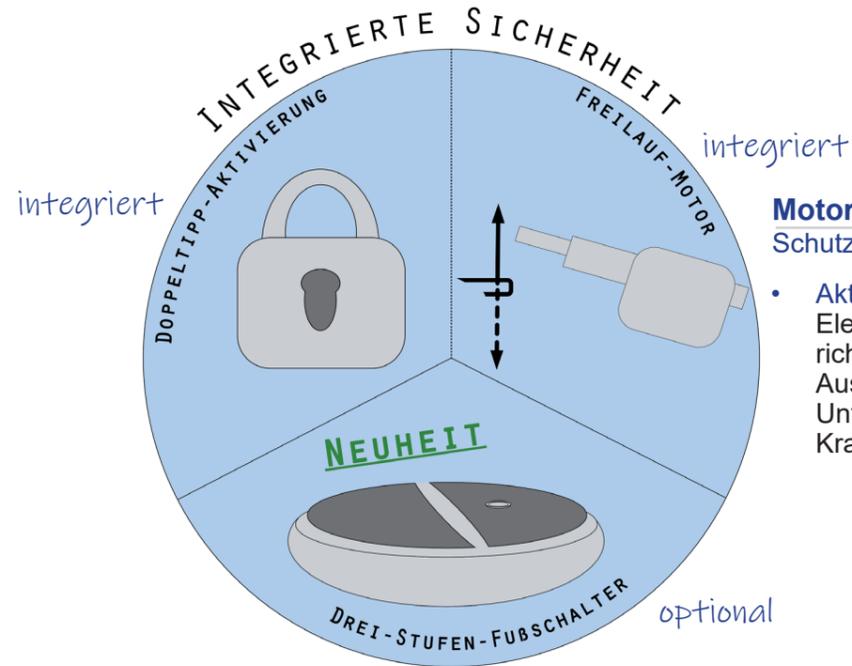


Motor mit Freilauf-Kupplung: Schutz des Bedieners

- Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftflusses

Doppeltipp-Aktivierung:

Schutz gegen unautorisierte/unbeabsichtigte Bedienung

- Automatisches Verriegeln des Elektromotors
- Nach 30 Sekunden Betätigung in eine Fahrtrichtung schaltet der Antrieb ab
- Freischaltung nur mit einer definierten Schaltfolge, dem Doppeltipp

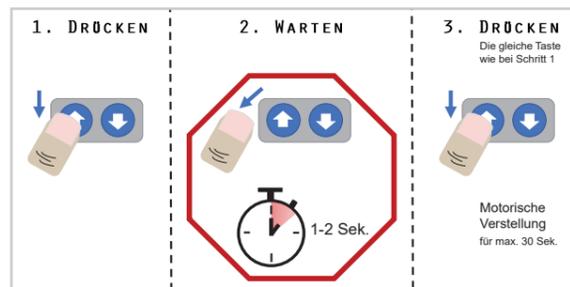

Ein Video zum richtigen Umgang mit der Doppeltipp-Aktivierung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal



OPTIONAL



Drei-Stufen-Fußschalter: Schutz des Bedieners

- Bei starkem Druck auf die Abwärtstaste wird eine dritte Stufe aktiviert. Dadurch stoppt der Motor sofort und verfährt anschließend automatisch einige cm nach oben, um den Bediener im Falle einer Einklemmung zu befreien.



Dewert-Liegen - mit Sicherheit!

Grundausrüstung und weitere Optionen



NEUE GRUNDAUSSTATTUNG:
HANDSCHALTER
MIT VERSENKTEM BEDIENFELD



Grundausrüstung bei Modellen mit elektromotorischer Höhenverstellung:



- Bedienung des Elektromotors standardmäßig durch einen Handschalter mit versenktem Bedienfeld
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor

Ausstattungsoptionen:

- Drei-Stufen-Fußschalter:** Aktivierung dritter Stufe durch stärkeren Druck auf die Abwärtstaste, dadurch sofortiges Stoppen des Motors und Verfahren um einige cm in die Gegenrichtung
- Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:** Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten
- Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:** Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten

Neueste Informationen zur aktuellen Sicherheitstechnik finden Sie auf unserer Internetseite im Bereich „Dewert-Liegen - mit Sicherheit!“

Die dritte Stufe ist nur beim Drei-Stufen-Fußschalter erhältlich, nicht bei der längsseitigen bzw. umlaufenden Fußbedienung.

Druck- & Anzeigentechnik kann es zu Farbabweichungen kommen, Maße sind ca. Angaben. Sämtliche Produkte sind nicht für den amerikanischen Markt zugelassen.