


# Echokardiographie-Liegen

## 3-teilige Universal-Liege mit elektromotorischer Höhenverstellung

... für Untersuchung, Behandlung ...

- Modell 2695-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2695-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2695-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

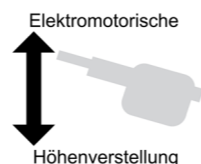

Hergestellt in Deutschland

Alle Abb.:  
Modell 2695-00XLE  
mit Ausstattungsoption:  
Papierrollenhalter (1270F/K);  
Polsterfarbe 64-717 deep sea



### Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- 2 Echoausschnitte im Mittelteil mit Füllpolstern zum Verschließen
- Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar, Bedienung durch einen Handschalter
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Bedienung des Elektromotors für die Höhenverstellung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 400 mm, mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar
- Mittelteil mit Echoausschnitten und Füllpolstern zum Verschließen: Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Fußteil 970 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm


### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 220 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

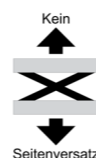

## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1182  
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1187  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm

### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 1920E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite




Art.-Nr. 1910E  
1 Fußschalter



Art.-Nr. 1940E  
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

### Nasenschlitz

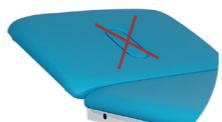

Art.-Nr. 1615-EF  
Entfall Nasenschlitz

### Wandschutzelemente



Art.-Nr. 1175  
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1270F/K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 1270F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm