


Serie 6000E

2-teilige Säulenliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

C-Bogen-geeignet

Modell 6100-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 6100-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

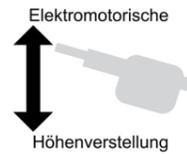

Modell 6100-04XLE mit Ausstattungsoption: Papierrollenhalter (1270K/F); Polsterfarbe 64-154 limone



Liege in oberer Position



Liege in unterer Position



6100-04E mit Ausstattungsoption: Liegefläche 1-teilig (028), Papierrollenhalter (1280K/F)

Grundausrüstung:

- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen, Ø 100 mm
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einseitig angeordnete Hubsäule
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter und einen Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm
- Fußteil fest | Fußteillänge: 1.580 mm
- Liegefläche mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.040 mm x Breite 690 mm
- Optional verschiedene Abmessungen, einteilige Liegefläche, auch mit HPL-Platte und abnehmbarer Polsterauflage möglich
- Polsterteilstärke: 60 mm


Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 Sek. durch AC-Elektromotor mit 3.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 800 mm
- Länge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

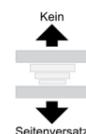

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Polsteroptionen



Art.-Nr. 029
Abnehmbare 1-teilige Polsterauflage auf durchleuchtungsfähiger HPL-Trägerplatte, Polsterauflage und Trägerplatte mit integriertem Nasenschlitz und Füllpolster, im direkten Bereich des Nasenschlitzes eingeschränkte Röntgenfähigkeit
Polsterabmessungen: 1.950 x 730 mm; Röntgenfreifläche: 1.340 x 650 mm



Art.-Nr. 028
Liegefläche 1-teilig, Breite: 730 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 600 mm

Art.-Nr. 028-10
Liegefläche 1-teilig, Breite: 800 mm
Röntgenfreifläche: 1.360 x 670 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1280K/F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1610
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil
Art.-Nr. 1620
Füllpolster für Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene, 350 mm lang

Art.-Nr. 1420
1 Stück Normschiene, 1300 mm lang

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080
1 Stück Seitensicherung seitlich versenkbar, verchromt, komplett aus Stahlrohr, Länge 1.060 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm



Besonderheit: C-Bogen geeignet:



- Verlängerungsarm für den Fußschalter am Kopfende zur einfachen Bedienbarkeit
- Liegefläche: mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil), Länge 1.000 mm x Breite 650 mm



Ansicht von unten