


Serie 2800XL

Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta mit elektromotorischer Höhenverstellung

- Modell 2800-00XLE* weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2800-03XLE* weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2800-04XLE* graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

* Modellbezeichnung abhängig von der Breite der Liegefläche (siehe technische Daten)

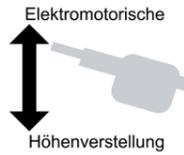

Modell 2804-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), umlaufende Fußbedienung (095E), Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder verstellbar (063); Polsterfarbe: 64-707 chestnut

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.950 mm
- Optional: Kopfteil
- Polsterteilstärke: 60 mm

Beide Abb.: Modell 2800-00XLE mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (046); Polsterfarbe: 64-717 deep sea



Liege in niedrigster Position



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung: Stange drücken = Liege fährt nach oben, Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 016K
Papierrollenhalter, Befestigung unter der Liegefläche (nicht vorstehend), für Liegenbreite 1.000 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 063
Kopfteil, durch Gasdruckfeder stufenlos positiv und negativ verstellbar

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: **Modell 2800XLE:** 1.000 mm | **Modell 2802XLE:** 1.100 mm | **Modell 2804XLE:** 1.200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

