


Serie 2800XL

4-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

Modell 2850-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2850-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2850-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

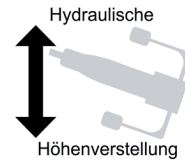

ohne
Abbildung



Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 2-teilig, quer geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil 2-teilig, quer geteilt, gesamte Fußteil-Einheit stufenlos bis +60° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Unteres Fußteilsegment zusätzlich stufenlos bis -65° verstellbar durch Gasdruckfeder (Dachstellung)
- Fußteillänge: oberes Fußteil: 405 mm | unteres Fußteil: 485 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:



- Manuell höhenverstellbar von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

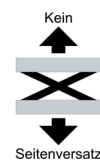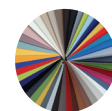


Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm

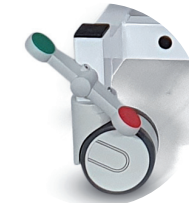

Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm, nicht bei Kopfteil 3-teilig (Art.-Nr. 056)

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, Verstellbereich -25° bis +45°, Art.-Nr. 010K nicht möglich, Abmessungen:
Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm
Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 008
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

