


# Serie 2800XL

## 3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung

- Modell 2890-00XLE weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2890-03XLE weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2890-04XLE graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

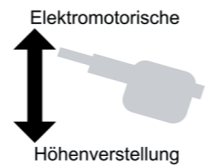

Alle Abb.:  
Modell 2890-00XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
Fahrbar auf einzeln  
feststellbaren Doppelrollen  
(077N), Papierrollenhalter  
(010F/K);  
Polsterfarbe: 64-713 corn

### Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
  - Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
  - Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +45° verstellbar
  - Mittelteillänge: 550 mm
  - Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +50° verstellbar
  - Fußteillänge: 980 mm
  - Polsterteilstärke: 60 mm




### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 1.010 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



### Design:

- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:
- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
  - Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

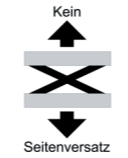

## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 077N  
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049  
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N  
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

### Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E  
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E  
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E  
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K  
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010F  
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430  
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

### Armstützen




Art.-Nr. B1440  
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Nasenschlitz

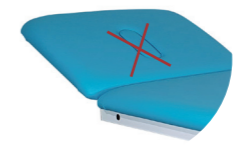

Art.-Nr. 1615-EF  
Entfall Nasenschlitz

### Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770  
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772  
Polster mittelweich durch Kaltschaum-auflage, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

