


Serie 2800XL

3-teilige Therapieliege mit hydraulischer Höhenverstellung

- Modell 2890-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2890-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2890-04XL/H grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

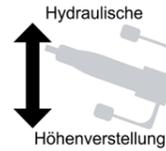

Alle Abb.:
Modell 2890-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
mit Zentralfeststellsystem
(046), Papierrollenhalter
(010F/K);
Polsterfarbe: 64-704 birch

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale und unabhängige Verstellung der Polstersegmente untereinander
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 420 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +45° verstellbar
- Mittelteillänge: 550 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -15° bis +50° verstellbar
- Fußteillänge: 980 mm
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:


- Manuell höhenverstellbar von 600 mm bis 1.020 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 200 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

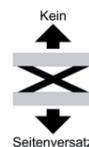

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 077N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen, Ø 75 mm



Art.-Nr. 049
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm



Art.-Nr. 044N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010F/K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm



Art.-Nr. 010F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm

Nasenschlitz



Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Anbau-Elemente



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Armstützen



Art.-Nr. B1440
1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar, für Normschiene

Seitensicherung



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. B1770
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 80 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm, Polsterstärke 70 mm

