

Serie 4800E


Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta mit elektromotorischer Höhenverstellung

Modell 4800-00E* weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 4800-03E* weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 4800-04E* grau aluminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

* Modellbezeichnung abhängig von der Breite der Liegefläche (siehe technische Daten)

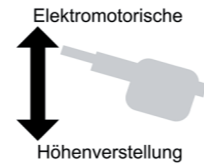

Alle Abb.:
Modell 4804-00E
mit Ausstattungsoption:
Rad-Hebe-System (045N);
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Großer Höhenverstellbereich
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Liege in niedrigster Position



Liege in höchster Position

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 1-teilig:

- Länge: 1.950 mm
- Optional: Kopfteil
- Polsterteilstärke: 60 mm

Technische Daten:


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm in 22 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: **Modell 4800E:** 1.000 mm | **Modell 4802E:** 1.100 mm | **Modell 4804E:** 1.200 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

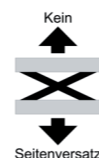

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 016K
Papierrollenhalter, Befestigung unter der Liegefläche (nicht vorstehend), für Liegenbreite 1.000 mm

Kopfteiloptionen



Art.-Nr. 063
Kopfteil, durch Gasdruckfeder stufenlos positiv und negativ verstellbar

