


Serie 4800E

3-teilige Therapieliege mit elektromotorischer Höhenverstellung


- Modell 4840-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 4840-03E weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 4840-04E graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

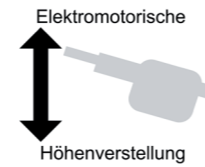

Alle Abb.:
Modell 4840-00E
mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N),
Umlaufende Fußbedienung
(095E) Kopfteil 3-teilig (055-10);
Polsterfarbe: 64-701 stone blue



Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Multifunktionale Verstellung der Polstersegmente
- Mögliche Verstellpositionen u.a.: Gesamtschräglage, Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Großer Höhenverstellbereich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors (Art.-Nr. 1999, Pflichtausstattung)
- Freilaufmotor, Auskupplung bei Widerstand in Abwärtsrichtung, Unterbrechung des Kraftflusses
- Dewert-Hygiene-Ausstattung 

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil stufenlos positiv zur Dachstellung verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
- Mittelteillänge: 530 mm
- Fußteil stufenlos positiv (+65°) zur Sitzposition verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
- Fußteillänge: 1.020 mm
- Alle Betätigungsgriffe an beiden Längsseiten der Liege
- Polsterteilstärke: 60 mm



Technische Daten:



- Elektromotorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 1.030 mm in 18 Sek. durch AC-Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Belastbarkeit: 250 kg; entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet



Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie

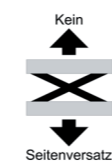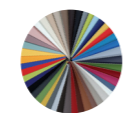

Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 040N
Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren
Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm,
Grundhöhe - 15 mm



Art.-Nr. 046
Fahrbar auf 4 Doppelrollen
zentral feststellbar, Ø 100 mm,
Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. 045N
Rad-Hebe-System mit ergo-
nomischen Fußhebeln zur
gesteuerten Absenkung der
Liege

Weitere Motorbedienelemente



Art.-Nr. 090E
1 Handschalter mit Magnet zur
Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E
1 Fußschalter



Art.-Nr. 092E
1 Fixierung für Fußschalter am
Untergestell montiert



Art.-Nr. 094E
Längsseitige Fußbedienung mit
Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten



Art.-Nr. 095E
Umlaufende ergonomische Fußbedienung
mit Sicherheitsverstellung:
Stange drücken = Liege fährt nach oben
Stange anheben = Liege fährt nach unten

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 010K
Papierrollenhalter, Befestigung unter
dem Kopfteil (nicht vorstehend),
für Liegenbreite 700 mm, nicht bei
Kopfteil 3-teilig




Art.-Nr. 010F
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil,
(70 mm vorstehend), für Liegenbreite
700 mm

Kopfteiloptionen




Art.-Nr. 055-10
Kopf 3-teilig mit Armstützen,
stufenlos absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25° bis +45°,
Art.-Nr. 010K nicht möglich,
Abmessungen:
Kopfteil: L 500 mm x B 370 mm
Armteil: L 420 mm x B 160 mm

Armstützen

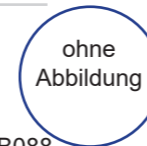

Art.-Nr. B088
1 seitliche Armstütze, schwenk- und
abnehmbar, zusätzlich dreh- und
kippar, fest angebracht

Nasenschlitz

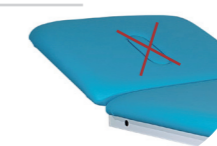

Art.-Nr. 1615-EF
Entfall Nasenschlitz

Polsteroptionen

Art.-Nr. 007
Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1772
Polster mittelweich durch
Kaltschaumauflage,
für Liegenbreite 700 mm,
Polsterstärke 70 mm

