


Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen

2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

Kopfteillänge: 750 mm

- Modell 2310-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2310-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2310-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

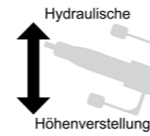

Beide Abb.:
Modell 2310-00XL/H
mit Ausstattungsoptionen:
Polsterbreite 800 mm (2310-800), Papierrollenhalter (1268K), Normschiene (1410), Ablagekorb (1850), Schiebegriff-Ausführung verchromt; Polsterfarbe: 64-717 deep sea

Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg-Einstellung) durch Gasdruckfeder
- Polsterteilstärke: 80 mm



Abb. zusätzlich: Befestigungskloben für Normschiene (1430), Infusionsstange für Normschiene (1450) mit Zubehör

Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai@ Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche
- Skai@ Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195
Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen zentral feststellbar, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende



Art.-Nr. 1190
5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells

Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF
Entfall der serienmäßigen Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge 700 mm, dann mit Wandabweisrädern Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005
1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 2310-800
Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 650 mm / 800 mm, Polsterstärke 100 mm

Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm