


# Serie 2000XL: Transport- und Aufwachliegen

## 2-teilige Transport- und Aufwachliege mit hydraulischer Höhenverstellung und Trendelenburg-Einstellung

Kopfteillänge: 550 mm

- Modell 2320-00XL/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Modell 2320-03XL/H weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)
- Modell 2320-04XL/H graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

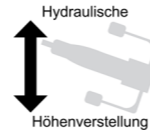

Alle Abb.:  
Modell 2320-00XL/H  
mit Ausstattungsoption:  
2 Stück Seitensicherungen  
abklappbar (2x 1040),  
mit Wandabweisrädern  
Ø 150 mm,  
Schiebegriff-Ausführung  
verchromt;  
Polsterfarbe: 64-717 deep sea

### Grundausrüstung:

- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf 4 zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, RAL 9006 pulverbeschichtet
- 2 Seitensicherungen seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Aufwachliegenpolster
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis 60° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg-Einstellung) durch Gasdruckfeder
- Polsterteilstärke: 80 mm



### Technische Daten:

- Manuell höhenverstellbar von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm | Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm | Gesamtbreite: 800 mm | optional Breite 800 mm, dann Gesamtbreite 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

### Design:

Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen:

- Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatte Oberfläche
- Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie



## Mögliche Ausstattungsoptionen (weitere siehe Preisliste)

### Fahrbarkeiten



Art.-Nr. 1185-EF  
Entfall der serienmäßigen  
Fahrbarkeit



Art.-Nr. 1195  
Fahrbar auf 4 Comfort-  
Rollen zentral feststellbar,  
Ø 150 mm, Rollen leitfähig,  
Grundhöhe + 70 mm



Art.-Nr. 1199  
Fußbügel zur zentralen  
Bremsbetätigung am  
Fußende



Art.-Nr. 1190  
5. Rolle, gefedert und  
zuschaltbar, mittig des  
Untergestells

### Seitensicherung



Art.-Nr. 1080-EF  
Entfall der serienmäßigen  
Seitensicherung (1 Stück)



Art.-Nr. 1040  
1 Stück Seitensicherung abklappbar mit  
Halterung, komplett aus Stahlrohr, Länge  
700 mm, dann mit Wandabweisrädern  
Ø 150 mm



Art.-Nr. 1005  
1 Stück Seitensicherung für  
Normschiene mit Befestigungskloben,  
komplett aus Stahlrohr, Länge 800 mm

### Papierrollenhalter



Art.-Nr. 1267K / 1268K  
Papierrollenhalter, Befestigung  
unter dem Kopfteil, für Liegen-  
breite 650 mm / 800 mm

### Polsteroptionen

Art.-Nr. 2320-800  
Polsterbreite 800 mm,  
Gesamtbreite der Liege 950 mm

Art.-Nr. 1765 / 1780  
Softpolster für hohen Liegekomfort  
aus Kaltschaum, für Liegenbreite  
650 mm / 800 mm,  
Polsterstärke 100 mm

### Anbau-Elemente



Art.-Nr. 1410  
1 Stück Normschiene 350 mm lang



Art.-Nr. 1430  
1 Befestigungskloben für  
Normschiene, Aufnahme passend für  
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. 1450  
1 Infusionsstange für Normschiene,  
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. 1850  
Ablagekorb mit Halterung,  
Abmessungen:  
L. 530 x B. 370 x H. 80 mm